

KIERUNEK WŁÓKNA/  
FIBRE DIRECTION



210 mm

POLE TEKSTOWE/  
TEXT BOX  
109 mm x 409 mm

linia złożenia/  
folding line

1

Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>UHLR-0016-800_1</b>		
Preparat/ Product:	<b>Starazolin Complete</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 130 x 420 mm ± 1 mm Format ulotki po złożeniu/Leaflet size after folding: 130 x 210 mm ± 0,5 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house Złożenie musi być zaprasowane/Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt; Arial 8.53 pt Tekst/Text: Times New Roman 8.53 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m <sup>2</sup>	Farmakod/ Pharmacode:	147
Kolorystyka/ Colours:	■ P. 2767 U	Opracował/ Prepared by:	22.02.2021 W.Streng

**Atidžiai perskaitykite visas šias instrukcijas, prieš pradėdami naudoti šią medicinos priemonę, nes jose pateikiama Jums svarbi informacija.**

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu simptomai nepranyksta arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.



Polfa Warszawa S.A.

## Starazolin® Complete

0,2 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio akių lašai

Sudėtyje nėra konservantų

Intensyviai drėkinantys lašai, pasižymintys apsauginėmis ir regeneracinėmis savybėmis

### Turinys:

1. Kas yra medicinos priemonė Starazolin Complete ir kam ji naudojama
2. Svarbi informacija prieš naudojant medicinos priemonę Starazolin Complete
3. Kaip naudoti medicinos priemonę Starazolin Complete
4. Galimi šalutiniai poveikiai
5. Kaip laikyti medicinos priemonę Starazolin Complete
6. Kita informacija

### 1. Kas yra medicinos priemonė Starazolin Complete ir kam ji naudojama

Starazolin Complete yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio, be konservantų.

- Natrio hialuronatas natūraliai randamas žmogaus organizme, pvz., ašarose.
- Dekspantenolis yra vitamino B grupės medžiaga, palaikanti natrio hialuronato savybes.

Šios medžiagos greitai, intensyviai ir ilgai drėkina, palaiko regeneraciją, apsaugo, atgaivina ir tausuoja akies paviršių.

Starazolin Complete padeda esant šioms būklėms:

- Sausumui,
- pojūčiui, kad po vokais yra smėlio, svetimkūnių,
- nuovargiui,
- deginimui,
- niežuliui,
- ašarojimui,
- sudirginimui,
- laikinam neryškiam regėjimui, atsiradusiam dėl akių nuovargio.

Lašai gražina natūralią akių drėgmės pusiausvyrą, apsaugo nuo pagartotinio jų išsausėjimo ir padeda palaikyti gerą jų būklę.

Starazolin Complete sudėtyje esantis natrio hialuronatas - natūrali medžiaga, sudaranti vienalytį, patvarų ir ilgalaikį apsauginį sluoksnį ant akies paviršiaus, apsaugo nuo sudirginimo ir pakartotinio išdžiūvimo. Šis sluoksnis neturi jokio neigiamo poveikio regėjimui.

Starazolin Complete sudėtyje esantis dekspantenolis (provitaminas B<sub>5</sub>) sustiprina drėkinamąsias natrio hialuronato savybes ir taip pat skatina regeneraciją ir apsaugo akies paviršių.

Starazolin Complete drėkina, apsaugo ir suformuoja apsauginį sluoksnį ant akies paviršiaus, pašalindamas diskomfortą, siejamą su:

- mechaniniu akies dirginimu, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius;
- kosmetikos vartojimu, aplinkos veiksnių, tokių kaip oro kondicionierius, šaltas, karštas, sausas oras, vėjas, oro užterštumas, pvz., dūmai, smogas, poveikiu ir buvimu dulktose ar saulėtose vietose;
- akių nuovargiu, atsiradusiu dėl ilgalaikio regėjimo sukoncentravimo, pvz., dirbant kompiuteriu, ilgai vairuojant automobilį, skaitant, žiūrint televizorių, naudojant išmanųjį telefoną;
- nepakankamu ašarų kiekiu ar jų sudėties pokyčiu, taip pat žmonėms su sausų akių sindromu ir vyresniems kaip 40 metų žmonėms.

Starazolin Complete gali naudoti žmonės, naudojančys visų tipų kontaktinius lęšius.

### 2. Svarbi informacija prieš naudojant medicinos priemonę Starazolin Complete

#### Medicinos priemonės Starazolin Complete naudoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai medicinos priemonės sudedamajai daliai;
- jeigu yra akies (-ių) infekcija.

#### Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Sąveika su kitais akių lašais nėra žinoma. Jeigu kartu reikia vartoti kitus akių lašus ar tepalus, tarp jų naudojimo darykite bent 15 minučių pertrauką. Starazolin Complete turi būti vartojamas paskutinis.

Po įlašavimo gali pasireikšti laikinas trumpalaikis neryškus matymas. Tokiu atveju nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol sutrikimas neišnyks. Taip pat gali pasireikšti laikinas sudirginimas, deginimas, dilgčiojimas. Jeigu bet kuris iš šių poveikių nepraeina ar pablogėja, nedelsdami pasakykite savo gydytojui.

Nepradurkite lašinimo sistemos prieš vartojimą.

### 3. Kaip naudoti medicinos priemonę Starazolin Complete


Prašome laikytis žemiau esančių instrukcijų, kurios padės užtikrinti tinkamą medicinos priemonės Starazolin Complete naudojimą.

### Naudojimo metodas

Atsižvelgiant į higienos reikalavimus, vieną medicinos priemonės pakuotę gali naudoti tik vienas vartotojas.

- Prieš lašinant medicinos priemonės Starazolin Complete, prašome atidžiai nusiplauti rankas.
- Prieš pirmąjį naudojimą nuimkite dangtelį, apverskite buteliuką su lašintuvu, tada švelniai paspauskite buteliuką, kol pasirodys pirmasis lašas.
- Prieš kiekvieną naudojimą nuimkite dangtelį ir įlašinkite lašus į akį (-is).
- Įprastinė dozė yra 1-2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginies maišelį arba kaip nurodė oftalmologas.
- Lėtai užmerkite akis, kad skystis galėtų tolygiai padengti visą akies (-ių) paviršių.
- Uždarykite buteliuką.
- Vengti lašintuvo galiuko kontakto su akies paviršiumi.

Nukratykite likusį lašą.

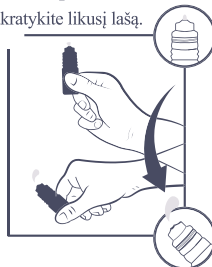

Po naudojimo ir prieš uždaranč dangtelius, nukratykite likusį lašą.

Kai buteliuke skysčio sumažėja, spauskite jį stipriau, kad išlašėtų reikiamas medicinos priemonės kiekis. Tai susiję su uždorio sistemos ypatybėmis, kurios užtikrina lašų, kurių sudėtyje nėra konservantų, sterilumą ir savybes.

Kadangi Starazolin Complete sudėtyje nėra konservantų, jis paprastai yra gerai toleruojamas ir gali būti naudojamas ilgą laiką.

Jeigu, nepaisant medicinos priemonės naudojimo, perštėjimas neišnyksta ir tęsiasi ilgą laiką, kreipkitės į savo oftalmologą.

### Panaudojus didesnę nei rekomenduojama medicinos priemonės Starazolin Complete dozę

Perdozavimo atvejų nustatyta nebuvo.

### 4. Galimi šalutiniai poveikiai

Pavieniais atvejais gali pasireikšti alerginių reakcijų, tokių kaip deginimas, akių ašarojimas, kurios praėina, nutraukus medicinos priemonės naudojimą. Iš karto po įlašavimo, laikinai ir trumpai regėjimas gali tapti neryškus. Jeigu pasireiškia alerginių reakcijų ar kitokių šalutinių poveikių, praneškite gamintojui.

### 5. Kaip laikyti medicinos priemonę Starazolin Complete

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Sandariai uždarytą buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant buteliuko ir dėžutės nurodytam galiojimo laikui (☞) pasibaigus, medicinos priemonės Starazolin Complete naudoti negalima.

Po pirmojo atidarymo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų.

### 6. Kita informacija

#### Sudedamosios dalys

Starazolin Complete sudėtyje yra: 0,2 % natrio hialuronatas, 2 % dekspantenolis, natrio citratas dihidratas, citrinų rūgšties monohidratas, labai išgrynintas vanduo.

Skaidrūs, be matomų dalelių akių lašai.

**Pakuotė:** kartono dėžutėje yra buteliukas, kuriame yra 5 ml arba 10 ml tirpalo, su vožtuvų sistema ir filtru, apsaugančiu nuo mikroorganizmų taršos.



Polfa Warszawa S.A.  
ul. Karolkowa 22/24  
01-207 Warszawa, Lenkija  
Tel. +48 22 691 39 00  
[www.polfawar.com.pl](http://www.polfawar.com.pl)

Instrukcijos parengimo data: 2018 m. kovo mėn.



#### Simbolių reikšmės:

**STERILE A** Sterilu



Perskaitykite naudojimo instrukciją.



Galioja iki: (galiojimo laiko data)



Gamintojas



Partijos numeris



Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

**Pirms šīs medicīniskas ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās, sazinieties ar ārstu.



Polfa Warszawa S.A.

## Starazolin® Complete

acu pilieni ar 0,2% nātrija hialuronātu un 2% dekspantenolu  
*Natrii hyaluronas, dexpanthenolum*

Nesatur konservantus

Intensīvi mitrinoši pilieni ar aizsargājošu un atjaunojošu iedarbību.

### Satura rādītājs

1. Kas ir medicīniska ierīce Starazolin Complete un kādam nolūkam to lieto
2. Svarīga informācija pirms medicīniskas ierīces Starazolin Complete lietošanas
3. Kā lietot medicīnisko ierīci Starazolin Complete
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt medicīnisko ierīci Starazolin Complete
6. Cita informācija

### 1. Kas ir medicīniska ierīce Starazolin Complete un kādam nolūkam to lieto

Starazolin Complete ir sterili acu pilieni, kas satur nātrija hialuronātu un dekspantenolu, bez konservantiem.

- Nātrija hialuronāts ir cilvēka ķermenī, piemēram, asaru plēvītes (asaru) sastāvā, esoša dabiska viela.
- Dekspantenols ir viela, kas ietilpst B vitamīnu grupā un papildina nātrija hialuronāta īpašības. Šīs vielas ātri, intensīvi un ilgstoši mitrina, veicina reģenerāciju, aizsargā, atsvaidzina un baro acs virsmu.

Starazolin Complete sniedz atvieglojumu šādos gadījumos:

- sausums;
- graušanas, svešķermeņa sajūta acī;
- nogurums;
- dedzināšanas sajūta;
- nieze;
- asarošana;
- kairinājums;
- īslaicīga redzes miglošanās acu noguruma dēļ.

Pilieni atjauno acu hidratācijas dabisko līdzsvaru, pasargā acis no atkārtotas izžūšanas un palīdz tās uzturēt labā stāvoklī.

Starazolin Complete satur nātrija hialuronātu – dabisku vielu, kas veido viendabīgu, izturīgu un ilgstoši kalpojošu aizsargslāni uz acs virsmas, pasargā no kairinājuma un atkārtotas izžūšanas. Šim slānim nav nevēlamas ietekmes uz redzi.

Starazolin Complete satur arī dekspantenolu (B<sub>5</sub> provitamīnu), kas pastiprina nātrija hialuronāta mitrinošās īpašības, kā arī veicina reģenerāciju un aizsargā acs virsmu.

Starazolin Complete mitrina, aizsargā un veido aizsargslāni uz acs virsmas, novēršot nepatīkamas sajūtas, kas ir saistītas ar:

- acs mehānisku kairinājumu, piemēram, acs izmeklēšanas laikā, un kontaktlēcu valkāšanu;
- kosmētikas līdzekļu lietošanu, vides faktoru ietekmi – gaisa kvalitāti, aukstu, karstu un sausu gaisu, vēju, piemēram, tabakas dūmu izraisītu gaisa piesārņojumu, smogu, kā arī uzturēšanas putekļainās telpās vai saulē;
- acu nogurumu, ko ir izraisījis ilgstoša redzes koncentrēšana, piemēram, darbs pie datora, ilgstoša transportlīdzekļa vadīšana, lasīšana, televizora skatīšanās vai viedtālruņa lietošana;
- nepietiekamu asaru daudzumu vai to sastāva pārmaiņām, arī cilvēkiem ar sausas acs sindromu un cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma.

Starazolin Complete var lietot cilvēki, kas izmanto jebkura veida kontaktlēcas.

### 2. Svarīga informācija pirms medicīniskas ierīces Starazolin Complete lietošanas

**Nelietojiet medicīnisko ierīci Starazolin Complete šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret jebkuru medicīniskās ierīces sastāvdaļu;
- acs(-u) infekcijas gadījumā.

### Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Mijiedarbība (savstarpēja ietekme) ar citiem acu pilieniem nav zināma. Ja nepieciešama vienlaicīga lietošana ar citiem acu pilieniem vai ziedēm, nākamie pilieni vai ziede ir jālieto ne ātrāk kā pēc 15 minūtēm. Starazolin Complete ir jālieto pēdējais.

Pēc iepilināšanas ir iespējama īslaicīga redzes miglošanās. Šādā gadījumā nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kamēr traucējumi nav izzuduši. Iespējams arī īslaicīgs kairinājums/dedzināšanas sajūta/durstīšanas sajūta. Ja kāda no šīm izpausmēm saglabājas vai pastiprinās, nekavējoties informējiet ārstu.

Necaurduriet pilināšanas sistēmu pirms lietošanas.

### 3. Kā lietot medicīnisko ierīci Starazolin Complete


Rīkojieties saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem, kas palīdzēs pareizi lietot medicīnisko ierīci Starazolin Complete.

### Lietošanas veids

Higiēnisku apsvērumu dēļ vienu ierīces iepakojumu drīkst lietot tikai viens lietotājs.

- Pirms ierīces Starazolin Complete iepilināšanas, lūdzu, rūpīgi nomazgājiet rokas.
- Pirms lietot pirmo reizi, noņemiet vāciņu, pagrieziet pudelītes dozatoru uz leju, tad saudzīgi saspiediet pudelīti, līdz parādās pirmais pilienis.
- Pirms katras lietošanas noņemiet vāciņu un iepiliniet pilienus acī(-īs).
- Parastā deva ir 1-2 pilieni 3 reizes dienā katras acs konjunktīvas maišā, vai arī saskaņā ar acu ārsta ieteikumiem.
- Lēni aizveriet acis, lai šķidrums varētu vienmērīgi nosegt visu acs(-u) virsmu.
- Aizveriet pudelīti.
- Nepieļaujiet, lai pilinātāja gals pieskartos acs virsmai.

Nokratiet atlikušo pilieni.

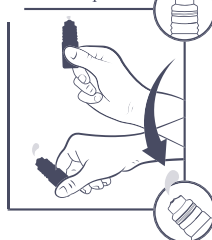

Pēc pilienų iepilināšanas acīs un pirms vāciņa uzlikšanas nokratiet atlikušo pilieni.

Kad šķidruma daudzums pudelītē samazinās, lai iepilinātu nepieciešamo daudzumu, saspiediet pudelīti spēcīgāk. Tas saistīts ar specifisko aizdares mehānismu, kas paredzēts sterilitātes un konservantus nesaturošo pilienų īpašību saglabāšanai.

Tā kā Starazolin Complete nesatur konservantus, tas parasti ir labi panesams un to var lietot ilgu laiku.

Ja, neraugoties uz pilienų lietošanu, sāpīgums turpinās un saglabājas ilgāku laiku, konsultējieties ar acu ārstu.

### Ja lietota lielāka Starazolin Complete deva nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumi nav bijuši.

### 4. Iespējamās blakusparādības

Atsevišķos gadījumos ir iespējamas alerģiskas reakcijas, piemēram, dedzināšanas sajūta un acu asarošana, kas izzūd, kad ierīces lietošana tiek pārtraukta. Uzreiz pēc iepilināšanas ir iespējama īslaicīgi aizmiglota redze. Alerģiskas reakcijas simptomu vai citu blakusparādību gadījumā, lūdzu, informējiet ražotāju.

### 5. Kā uzglabāt Starazolin Complete

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu ārējā kartona kastītē. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet medicīnisko ierīci Starazolin Complete pēc derīguma termiņa beigām (🗑️), kas norādīts uz pudelītes un kartona kastītes.

Ierīci var lietot 90 dienas pēc pirmās atvēršanas.

### 6. Cita informācija

#### Sastāvs

Starazolin Complete sastāvā ir 0,2% nātrija hialuronāta, 2% dekspantenola, nātrija citrāta dihidrāts, citronskābes monohidrāts, augsti attīrīts ūdens.

Caurspīdīgi, dzidri acu pilieni.

**Iepakojums:** pudelīte, kas satur 5 ml vai 10 ml šķidruma, aprīkota ar vārsta slēgšanas sistēmu un filtru, kas aizsargā medicīnisko ierīci no piesārņošanas ar mikroorganismiem. Medicīniskā ierīce ir ievietota kartona kastītē.



Polfa Warszawa S.A.  
ul. Karolkowa 22/24  
01-207 Warszawa, Polija  
tel. +48 22 691 39 00  
[www.polfawar.com.pl](http://www.polfawar.com.pl)

Lietošanas instrukcijas sagatavošanas datums: 2018. gada marts

0197 **STERILE A**

### Izmantoto simbolu skaidrojums:

**STERILE A** Sterils



Izlasīt lietošanas instrukciju



Izlietot līdz: (derīguma termiņš)



Ražotājs



Sērījas numurs



Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C